

## 高压灭菌器“MICRO 8”, “MED 12”和“MED 20”

压力调节器恒温器: 1和2 bar. 温度: 121 °C和134 °C  
 立式台式型号“MICRO 8”容量: 8 L. “MED 12” 容量: 12 L  
 立式站立式型号“MED 20”容量: 20 L

### 经济之选. 半自动化

#### 安全保护:

安全阀: 防止高压釜内的压力超过最大设定极限  
 安全压力: 如果超过压力设定极限, 将断开加热器电源  
 安全恒温器: 在水箱过热或缺水的情况下, 断开加热  
 由模制热塑性塑料制成的隔热盖

#### 特点

AISI 304不锈钢外壳和顶部  
 不锈钢腔室和盖子易于打开  
 INCOLOY 特殊不锈钢加热元件, 使用寿命长, 耐腐蚀, 耐高温  
 启动时手动排气(“MICRO 8”型号)  
 自动空气吹扫(“MED 12”和“MED 20”型号)  
 防止盖子打开的安全装置  
 启动主开关




#### 后部

电源  
 两个保险丝托架  
 安全恒温器

#### 侧边部分

排水口  
 蒸汽和排水选择阀

#### 控制面板

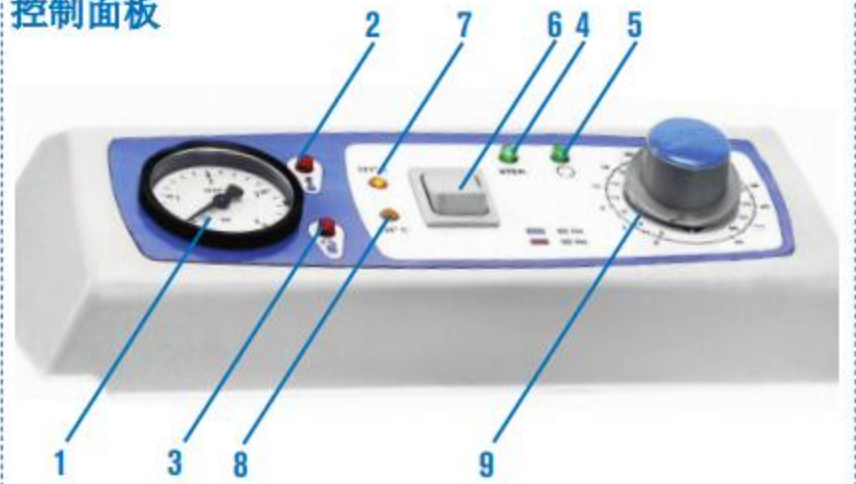

1. 压力计
2. 过温报警指示灯
3. 门开启指示灯
4. 灭菌阶段指示灯
5. 灭菌周期结束指示灯
6. 温度选择: 121°C / 134°C
7. 温度设置在121°C的指示灯
8. 温度设置在134°C的指示灯
9. 时间设置: 0 - 60'

## 高压灭菌器“MICRO 8”

台式型号



#### 型号

Part No.	Capacity litres	Ø (usable) cm	Height (usable) cm	Height/Width/Depth (exterior) cm	Power W	Weight Kg
4001745	8	24	15	40 38 38	1000	13

配有一个不锈钢网篮, 直径22x14cm 高. Part no. 1004771.