

高压灭菌器“MICRO 8”, “MED 12”和“MED 20”

压力调节器恒温器: 1和2 bar. 温度: 121 °C和134 °C

立式台式型号“MICRO 8”容量: 8 L “MED 12” 容量: 12 L

立式站立式型号“MED 20”容量: 20 L

经济之选. 半自动化

安全保护:

安全阀: 防止高压釜内的压力超过最大设定极限

安全压力: 如果超过压力设定极限, 将断开加热器电源

安全恒温器: 在水箱过热或缺水的情况下, 断开加热

由模制热塑性塑料制成的隔热盖

特点

AISI 304不锈钢外壳和顶部

不锈钢腔室和盖子易于打开

INCOLOY 特殊不锈钢加热元件, 使用寿命长, 耐腐蚀, 耐高温

启动时手动排气(“MICRO 8”型号)

自动空气吹扫(“MED 12”和“MED 20”型号)

防止盖子打开的安全装置

启动主开关



后部

电源

两个保险丝托架

安全恒温器




侧边部分

排水口

蒸汽和排水选择阀

控制面板

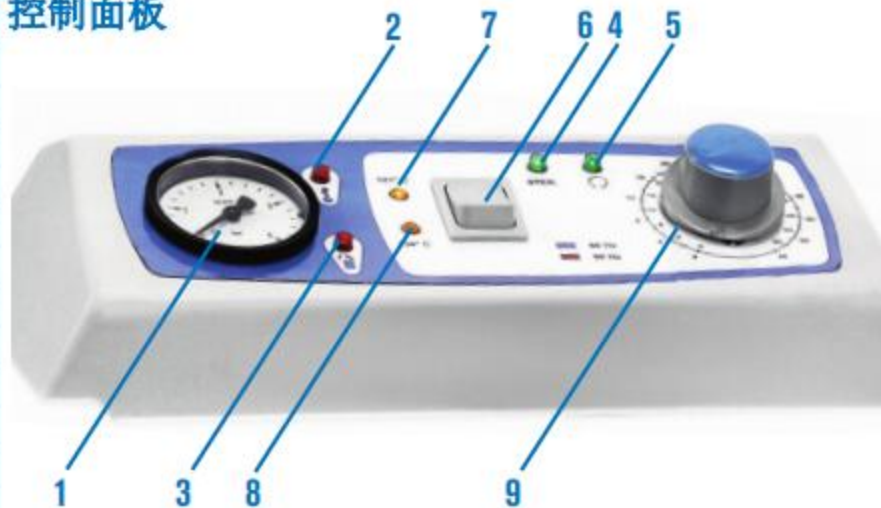

1. 压力计
2. 过温报警指示灯
3. 门开启指示灯
4. 灭菌阶段指示灯
5. 灭菌周期结束指示灯
6. 温度选择: 121°C / 134°C
7. 温度设置在121°C的指示灯
8. 温度设置在134°C的指示灯
9. 时间设置: 0 — 60'



高压灭菌器“MED 20”

立式站立式型号

符合设备压力调节规范

特点: 见第56页



型号

Part No.	Capacity litres	Ø (usable) cm	Height (usable) cm	Height/Width/Depth (exterior) cm	Power W	Weight Kg
4001757	20	24	41	70 38 38	2500	41

配有2个不锈钢网篮, 直径23x17 cm高. Part No. 1004773